

Vorfußpolster aus Silikon

Forefoot Cushion
Capitonnage de l'avant-pied
Voorvoetkussen
Cuscino di scarico avanpiede

Art.-Nr./Art. no. 107 080

2 Stück/pieces/pièces/stuks/pezzi

PEDI SOFT®
Silikon & Gel

bort
MEDICAL



Sanfter Fußschutz aus Silikon & Gel




Art.-Nr. 107 010



Art.-Nr. 107 020



Art.-Nr. 107 030

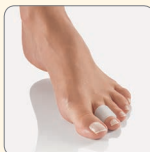

Art.-Nr. 107 060



Art.-Nr. 107 070




Art.-Nr. 107 100



Art.-Nr. 107 140



Art.-Nr. 107 120

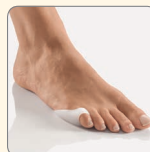

Art.-Nr. 107 130

PEDI SOFT®
Silikon & Gel

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Distribution:

- CH Orthosan SA | 3172 Niederwangen | Tel. 0848800333
- F Neut | 75002 Paris | Tél. 0142338346
- B M2M Europe NV | 9900 Eeklo | Tel. 093784800
- I Meddy Italia s.r.l. | 22032 Albese con Cassano
Tel. 0314291111

BORT GmbH | Postfach 11330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com

CE
Made in Germany

Art.-Nr. 107 080

M4070-107080/MAL-10/14



4 00586822029219
D PZN 01512914
AT PZN 3624652
CH PhC 2314783
B CNK 1636-893

Funktion:

Das PEDISOFT® Vorfußpolster deckt großflächig den beim Tragen hoher Schuhe sehr belasteten Vorfußbereich ab. Es dient der Druckentlastung und der Unterstützung des Fußgewölbes.



Vorteile durch Silikon:

- dauerhaft und strapazierfähig
- sehr weich und glatt
- hautfreundlich und hygienisch
- dank Memory-Effekt optimale Anpassung, nach dem Tragen sofortige Rückkehr in die ursprüngliche Form

Pflegehinweis:

Zur Reinigung mit Seife waschen und gut trocknen lassen. Oberseite leicht einpulvern.

Vorfußpolster

Art.-Nr. 107 080

Anwendung:

Auf gereinigter, trockener Haut anwenden. Den Zehensteg wahlweise zwischen der zweiten oder dritten Zehe positionieren. Dies sorgt für einen rutschsicheren Halt beim Gehen und sichere Positionierung im Vorfußbereich.

PEDI SOFT®
Silikon & Gel

LOT: III IIII IVI Im IIIm IIIIm IVm In



Vorfußpolster aus Silikon

Forefoot Cushion
Capitonnage de l'avant-pied
Voorvoetkussen
Cuscino di scarico avanpiede

Art.-Nr./Art. no. 107 080

(GB) Forefoot Cushion

Function

PEDISOFT® Forefoot Cushion covers to a large extent the heavily loaded forefoot when wearing high-heeled shoes.

It serves for pressure reduction and support of foot arch.

Care instructions

For cleaning wash with soap, dry well and powder.

Application

Apply onto cleaned, dry skin. Place toe extension alternatively between second or third toe. This assures slippage-free position during walking and safe positioning at forefoot area.

(F) Capitonnage de l'avant-pied

Fonction

Le capitonnage PEDISOFT® protège la partie particulièrement exposée de l'avant pied lors du port de chaussures hautes. Il réduit la pression et soutient la voûte plantaire.

Conseils pour l'entretien

Après usage il doit être lavé avec du savon. Laisser sécher et enduire de talc.

Utilisation

Sur peau propre et sèche. Positionner la partie supérieure (choisir entre le deuxième et le troisième orteil). Tenue sûre, sans-glisser et bonne position au niveau de l'avant-pied.

(I) Cuscino di scarico avanpiede

Funzione

Il cuscino per avanpiede PEDISOFT® alleggerisce la pressione sull'avvanpiede causata in modo particolare dall'uso di calzature alte. Serve anche da supporto alla zona metatarsiale.

Avviso per la cura

Lavare con sapone neutro, lasciare asciugare bene, cospargere di borotalco.

Applicazione

Applicare sulla pelle pulita e asciutta. Posizionare il fermo infradito tra il secondo o terzo dito. In questo modo, il cuscino rimane stabile nella posizione scelta.